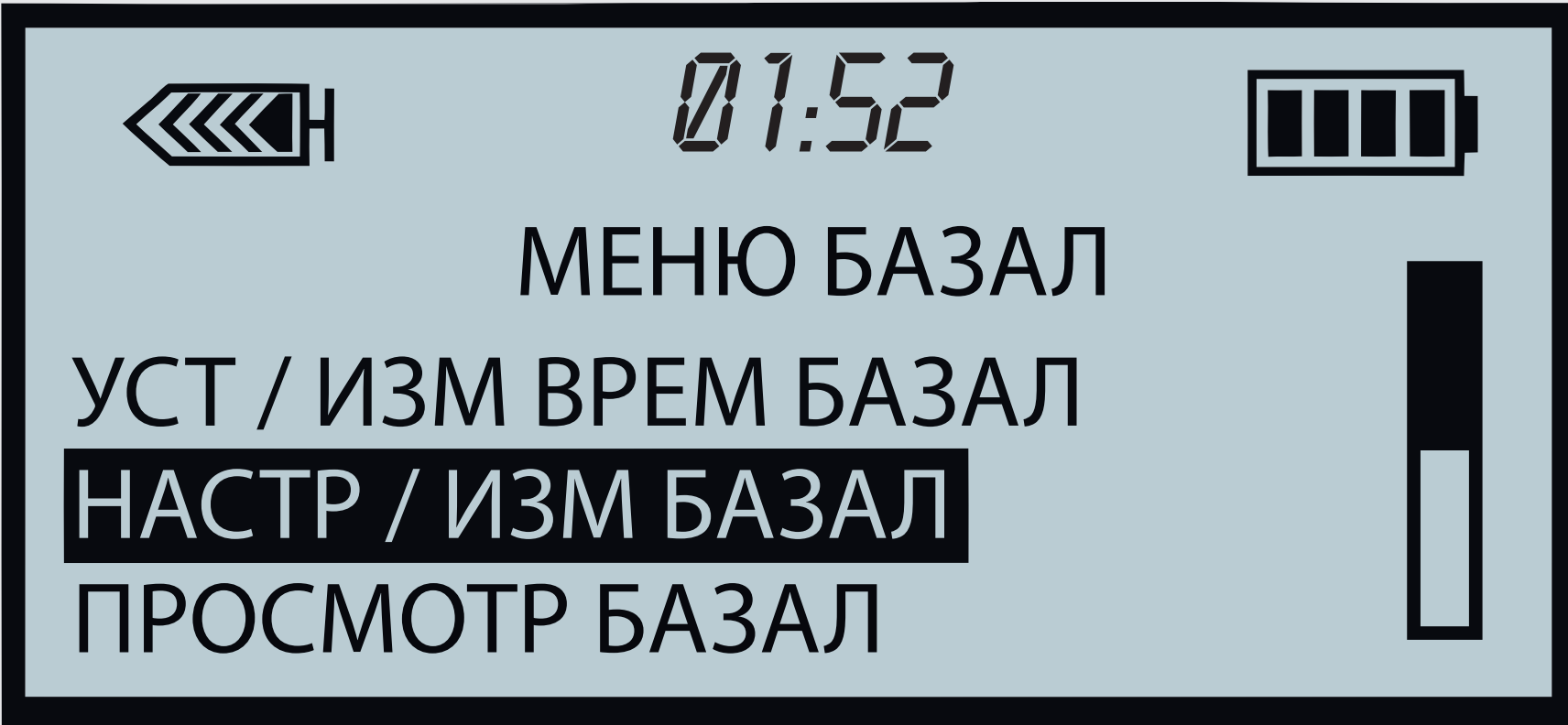
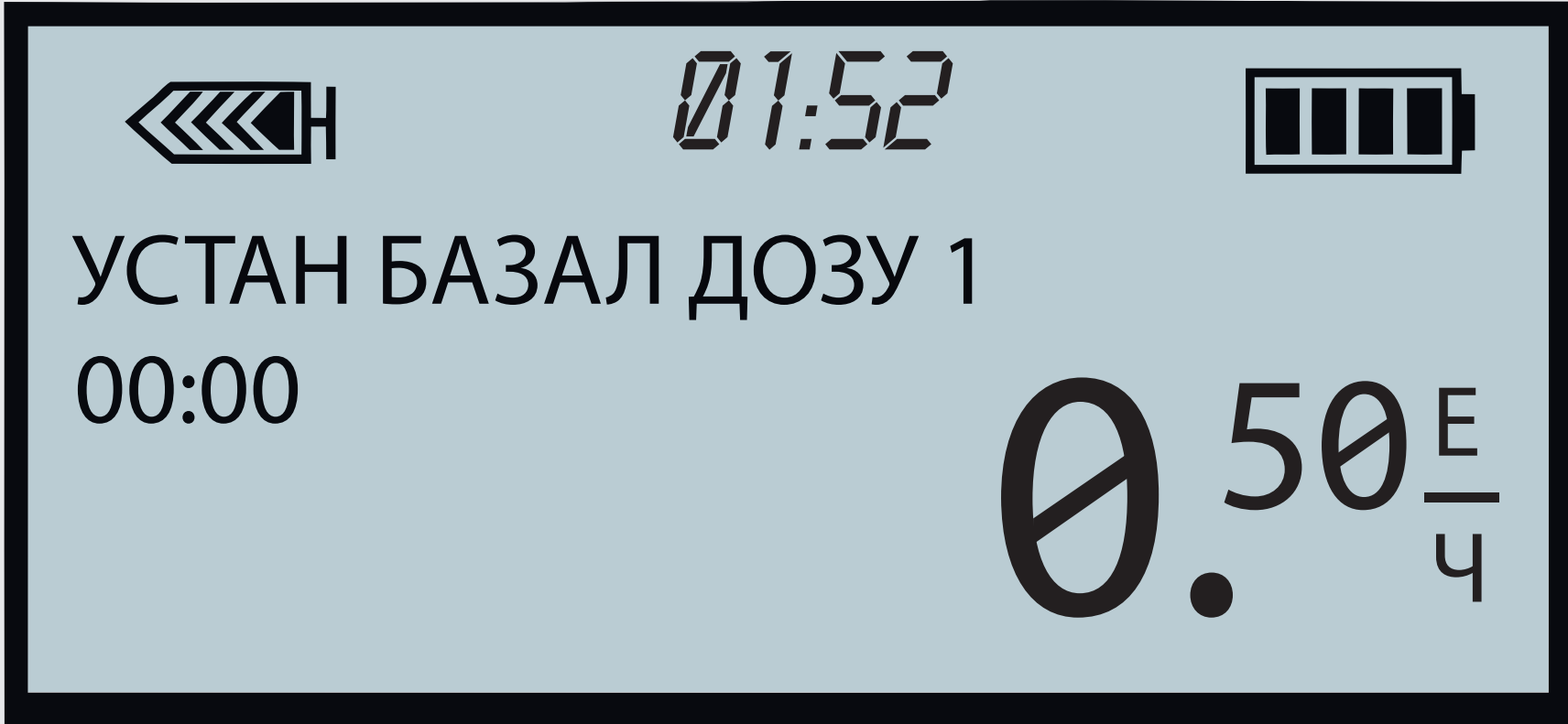
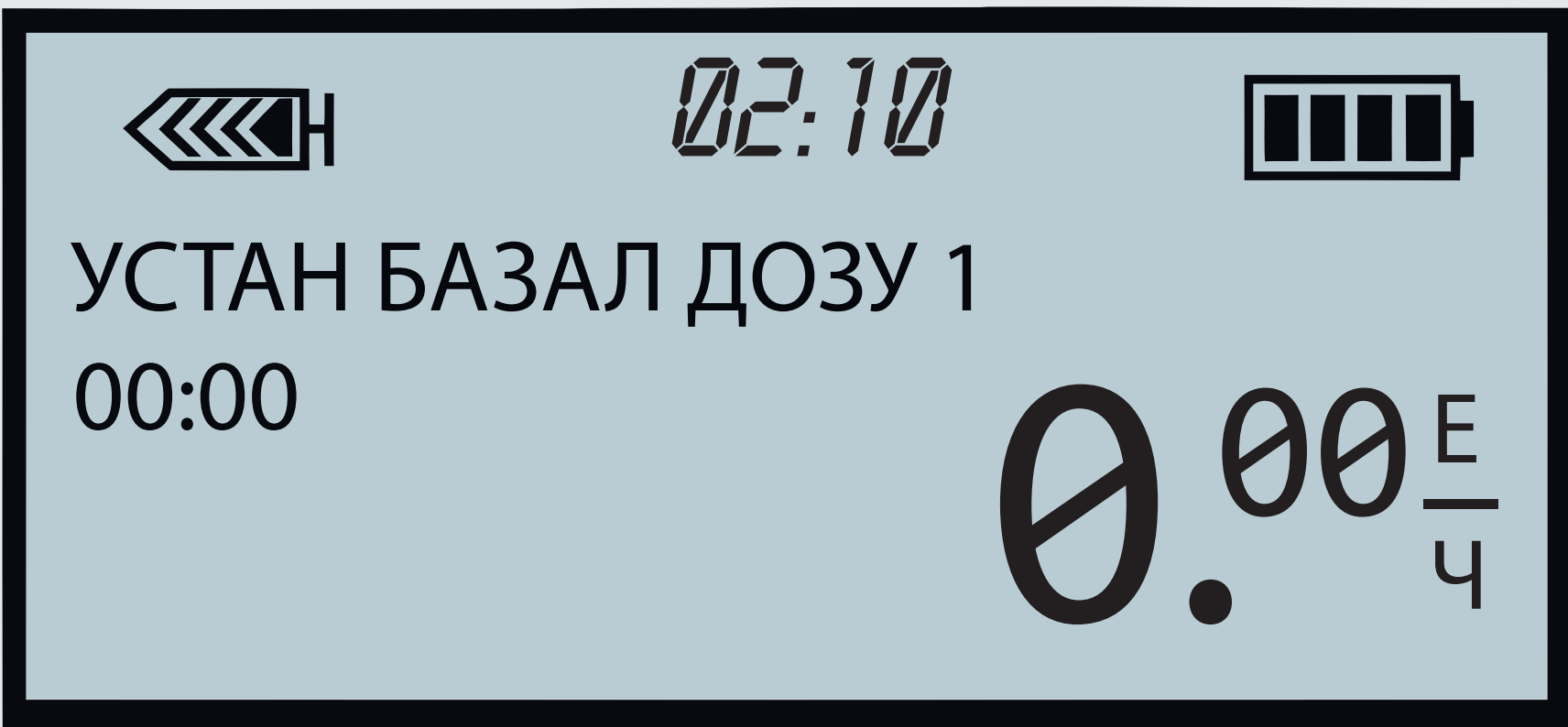
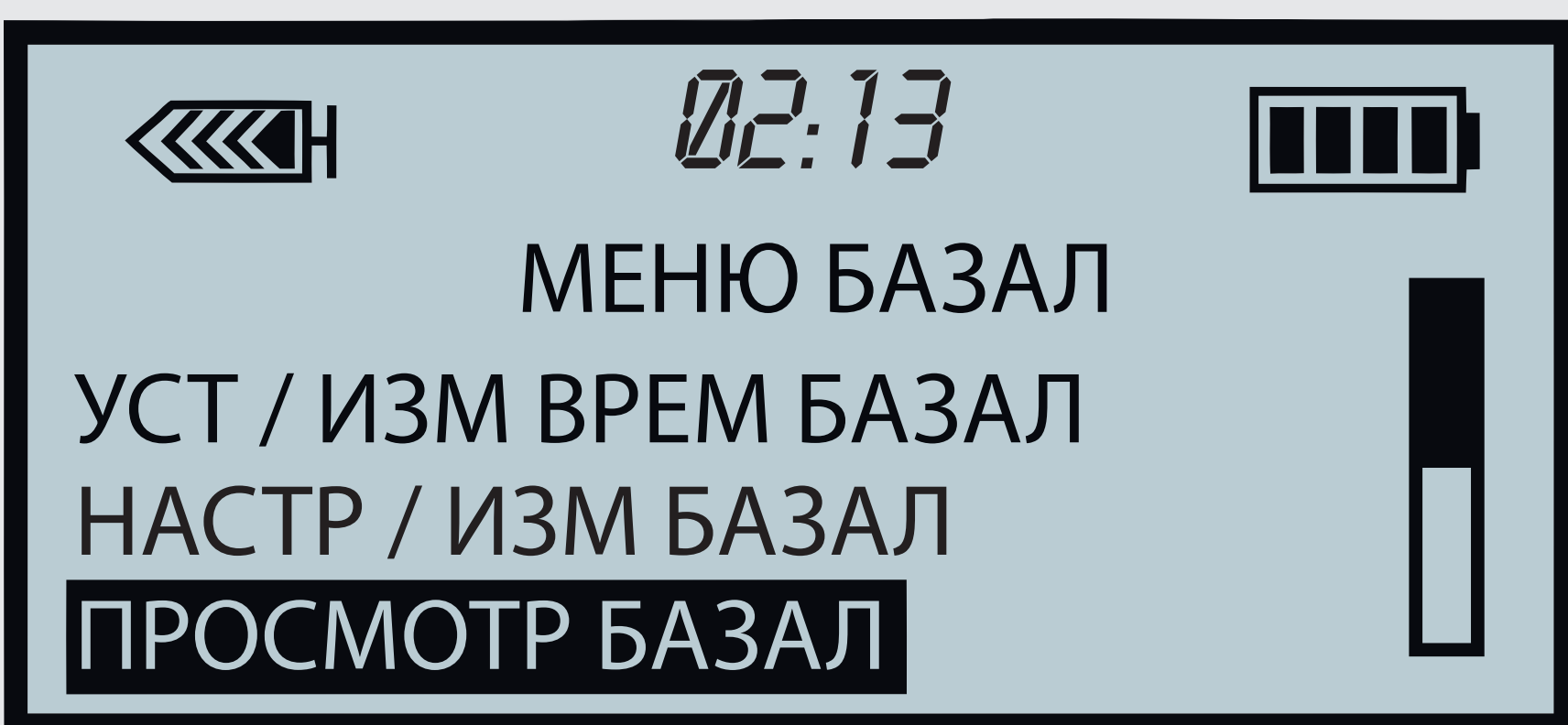
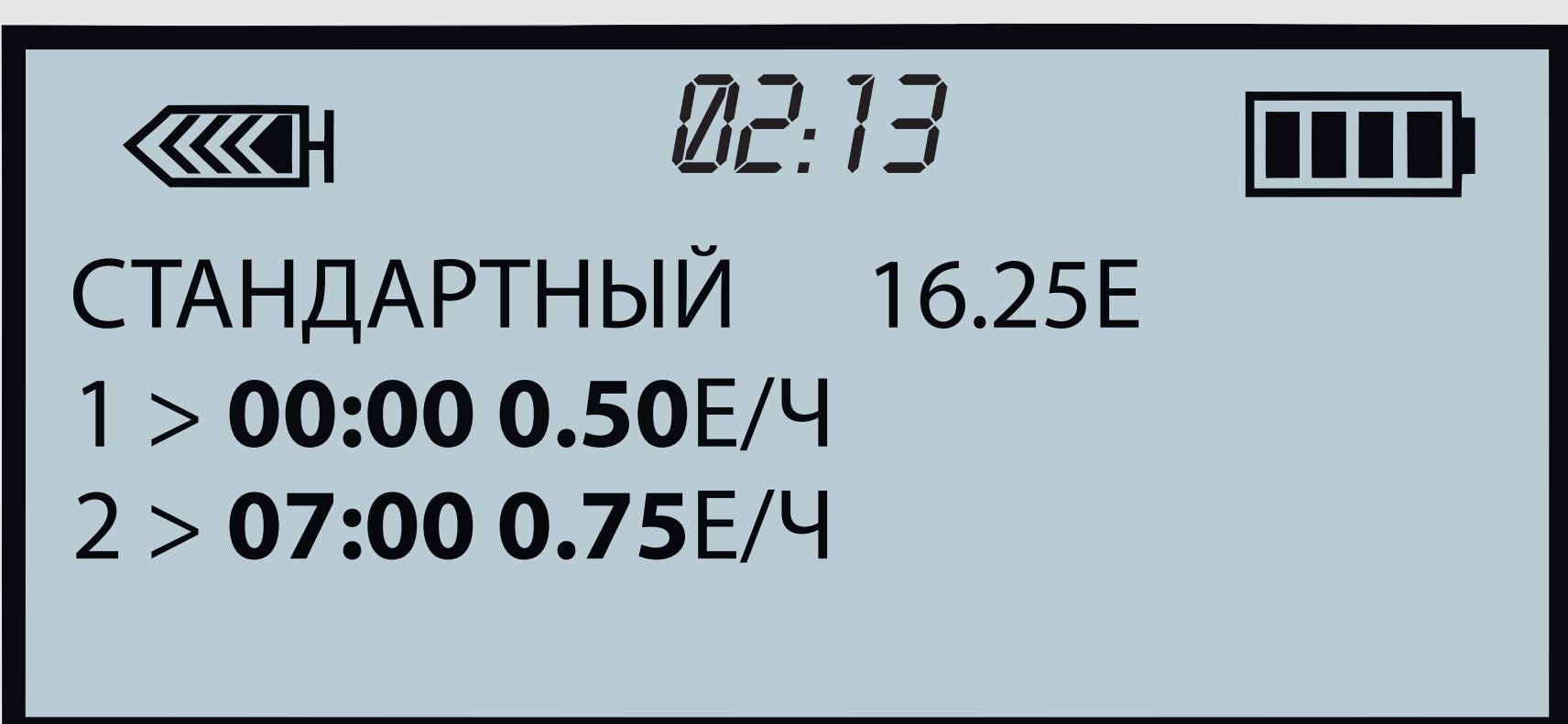


ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

| | | |
|---|--|---|
| 1 |  <p>01:52 ОСНОВНОЕ МЕНЮ ОТЛОЖИТЬ СЕНСОР БАЗАЛЬНЫЙ</p> | В ОСНОВНОМ МЕНЮ выберите БАЗАЛЬНЫЙ и нажмите АСТ |
| 2 |  <p>01:52 МЕНЮ БАЗАЛ УСТ / ИЗМ ВРЕМ БАЗАЛ НАСТР / ИЗМ БАЗАЛ ПРОСМОТР БАЗАЛ</p> | Выберите НАСТР/ИЗМ БАЗАЛ и нажмите АСТ |
| 3 |  <p>01:52 УСТАН БАЗАЛ ДОЗУ 1 00:00 0.50 $\frac{E}{ч}$</p> | На экране появится УСТАНОВИТЕ БАЗАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ |
| 4 |  <p>02:10 УСТАН БАЗАЛ ДОЗУ 1 00:00 0.00 $\frac{E}{ч}$</p> | Установите базальную скорость 0,5ЕД/ч и нажмите АСТ |
| 5 |  <p>02:11 УСТАН БАЗАЛ ДОЗУ 2 07:00 0.75 $\frac{E}{ч}$</p> | Установите вторую базальную скорость, время начала 7:00 и дозу 0,75ЕД/ч, нажмите АСТ |
| 6 |  <p>02:12 БАЗАЛ ДОЗА ТЕКУЩ ДОЗА 0.50 E/ч НАЧАЛЬН # 1-00:00 24 Ч ВСЕГО 16.25E</p> | Появился экран БАЗАЛЬНАЯ ДОЗА , на котором отображена текущая базал доза, время начала и суммарная суточная доза |
| 7 |  <p>02:13 МЕНЮ БАЗАЛ УСТ / ИЗМ ВРЕМ БАЗАЛ НАСТР / ИЗМ БАЗАЛ ПРОСМОТР БАЗАЛ</p> | В меню базальный выберите ПРОСМОТР БАЗАЛ |
| 8 |  <p>02:13 СТАНДАРТНЫЙ 16.25E 1 > 00:00 0.50E/ч 2 > 07:00 0.75E/ч</p> | На экране появится суточная суммарная доза инсулина и часовой интервалкаждой дозы |