



# ВРЕМЕННАЯ БАЗАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Эта функция позволяет немедленно увеличить или уменьшить базальную дозу на заданный период времени. Эта функция используется в основном при занятиях спортом и во время болезни.

## ВЫБРАТЬ ТИП ВРЕМЕННОЙ БАЗАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

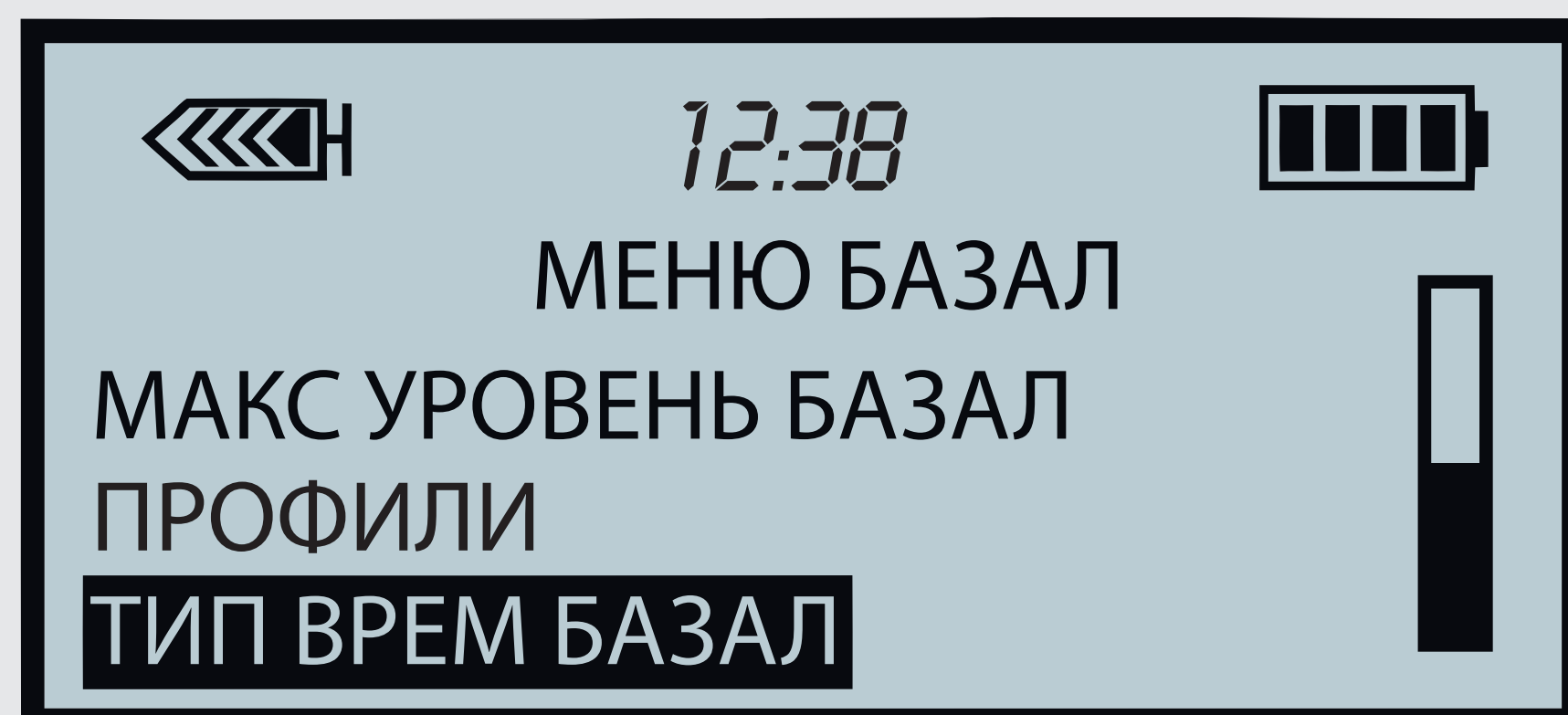


Из **ОСНОВНОГО МЕНЮ** прокрутите до строчки **БАЗАЛЬНЫЙ**. Нажмите АСТ

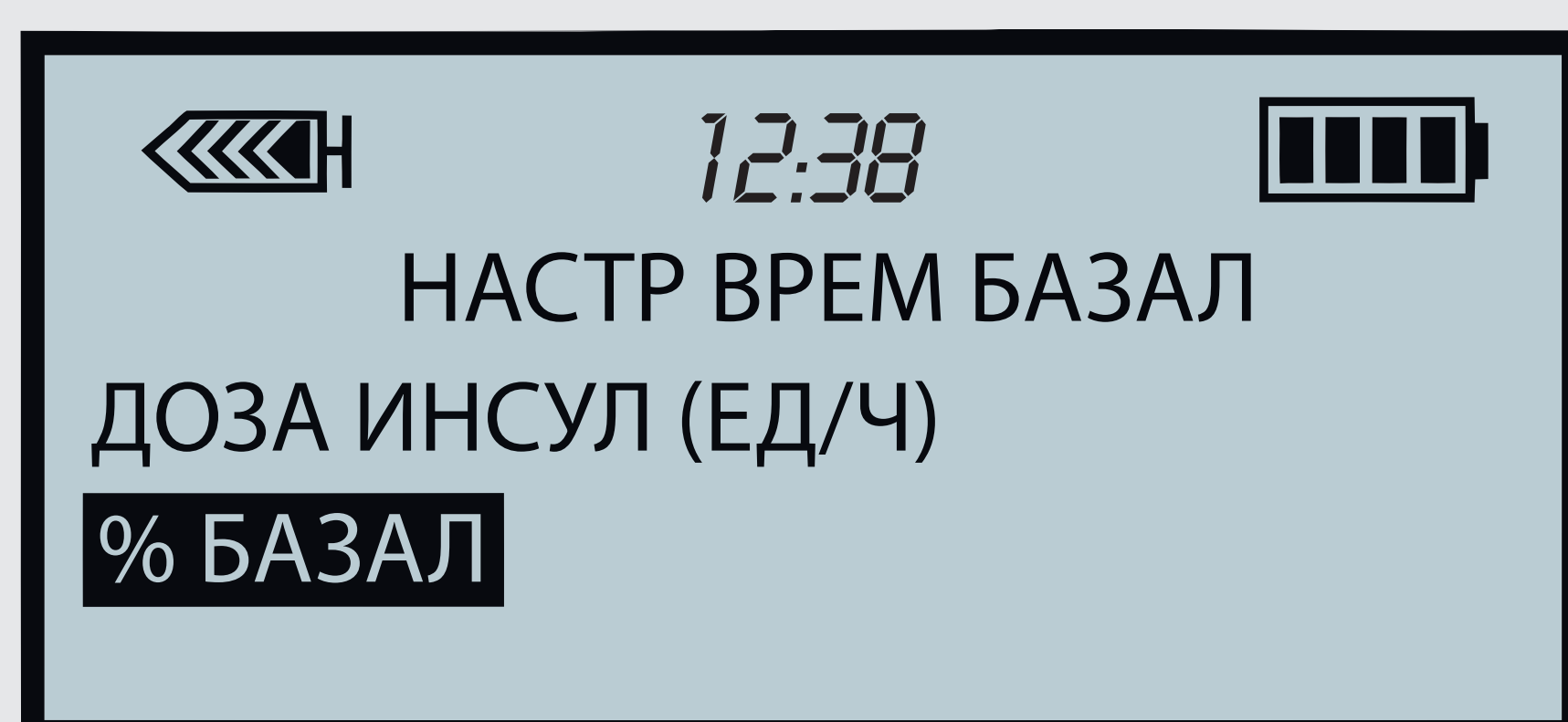


Выберите строку **ТИП ВРЕМ БАЗАЛ**.  
Нажмите АСТ

Выберите **ДОЗА ИНСУЛ (ЕД/Ч)**  
или **% БАЗАЛ** и нажмите АСТ

## УСТАНОВИТЬ ВРЕМЕННУЮ БАЗАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ

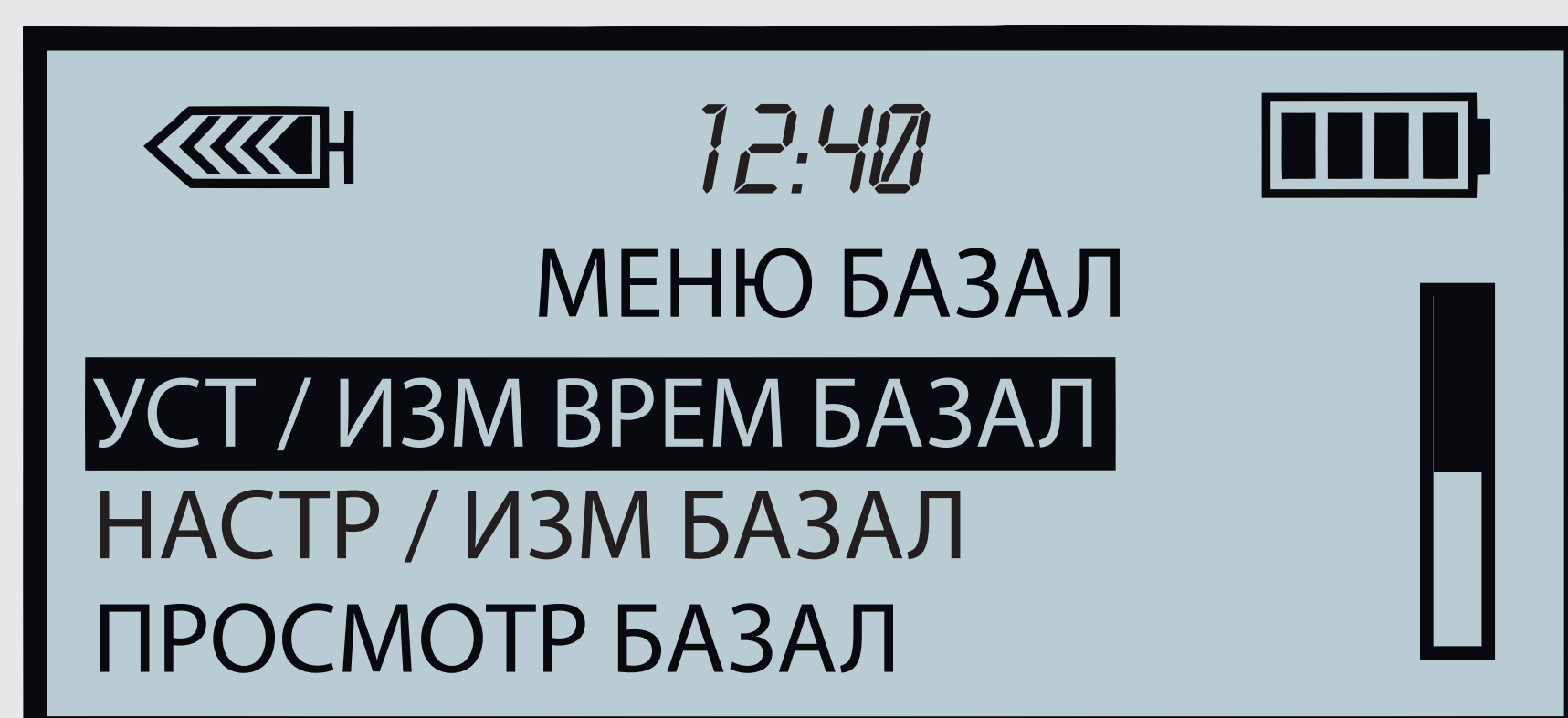


Из **ОСНОВНОГО МЕНЮ** прокрутите до строчки **БАЗАЛЬНЫЙ**. Нажмите АСТ

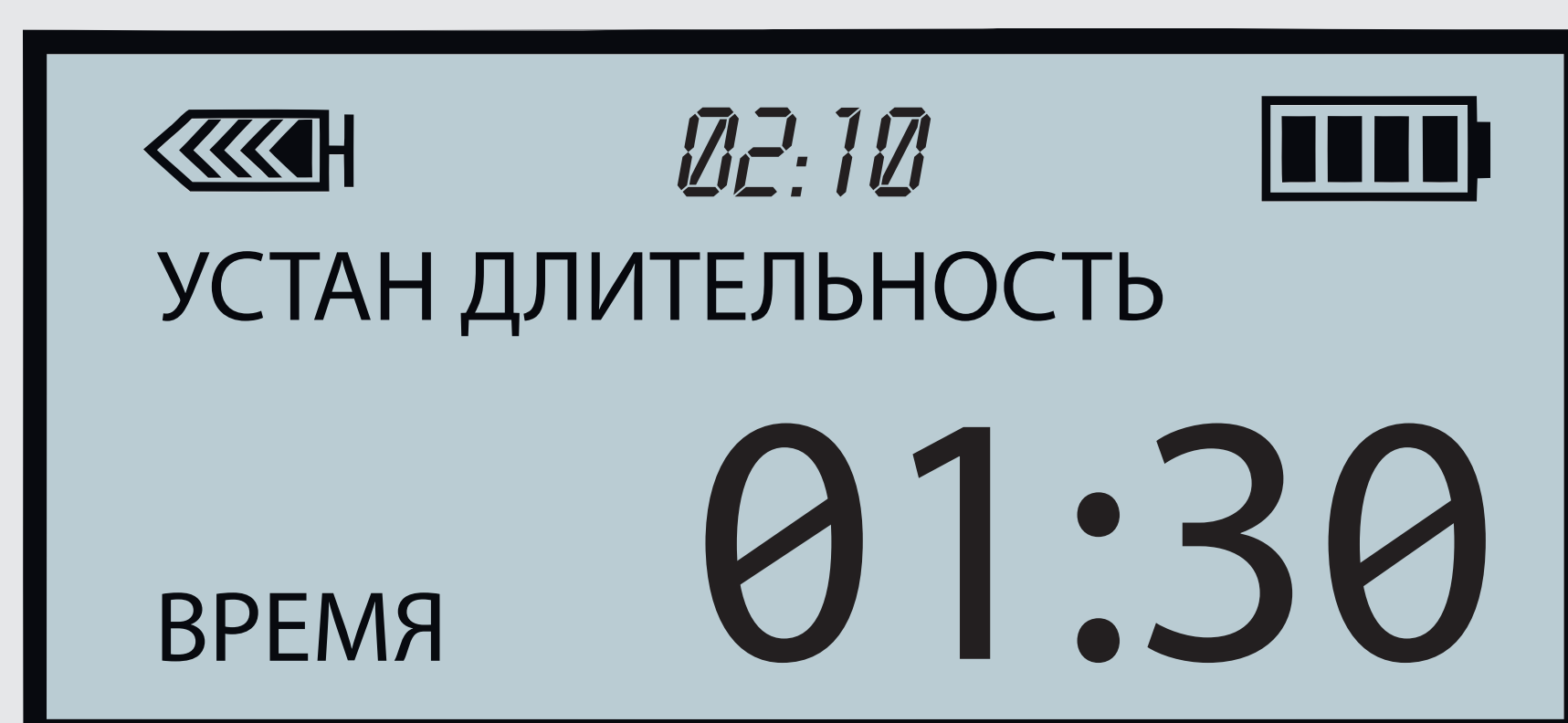


Выделена строка **УСТАНОВИТЬ/ИЗМЕНИТЬ ВРЕМЕННУЮ БАЗАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ**.  
Нажмите АСТ

Установите длительность. Нажмите АСТ

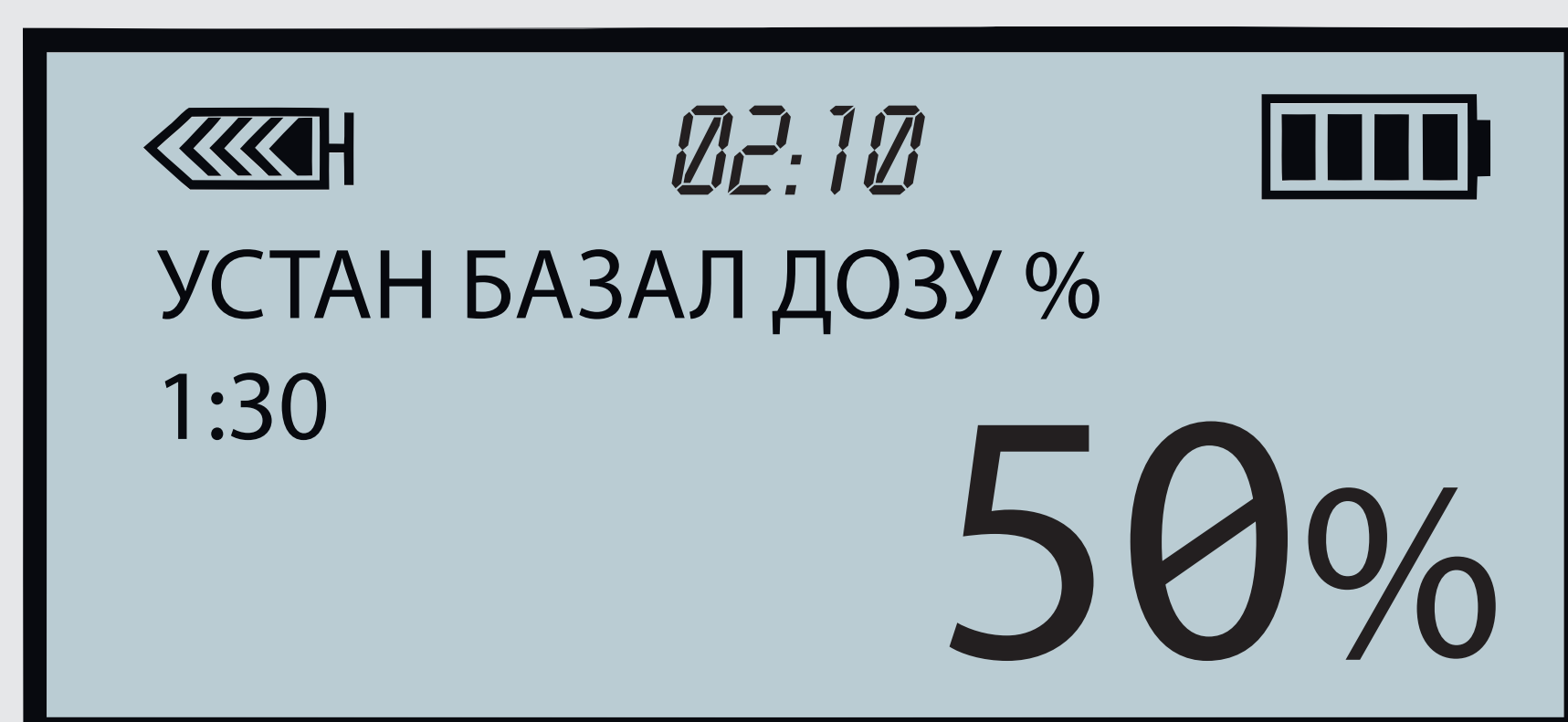

С помощью стрелок **УСТАНОВИТЕ ВРЕМЕННУЮ БАЗАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ** Ед/ч или измените %

## ОТМЕНИТЬ ВРЕМЕННУЮ БАЗАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ

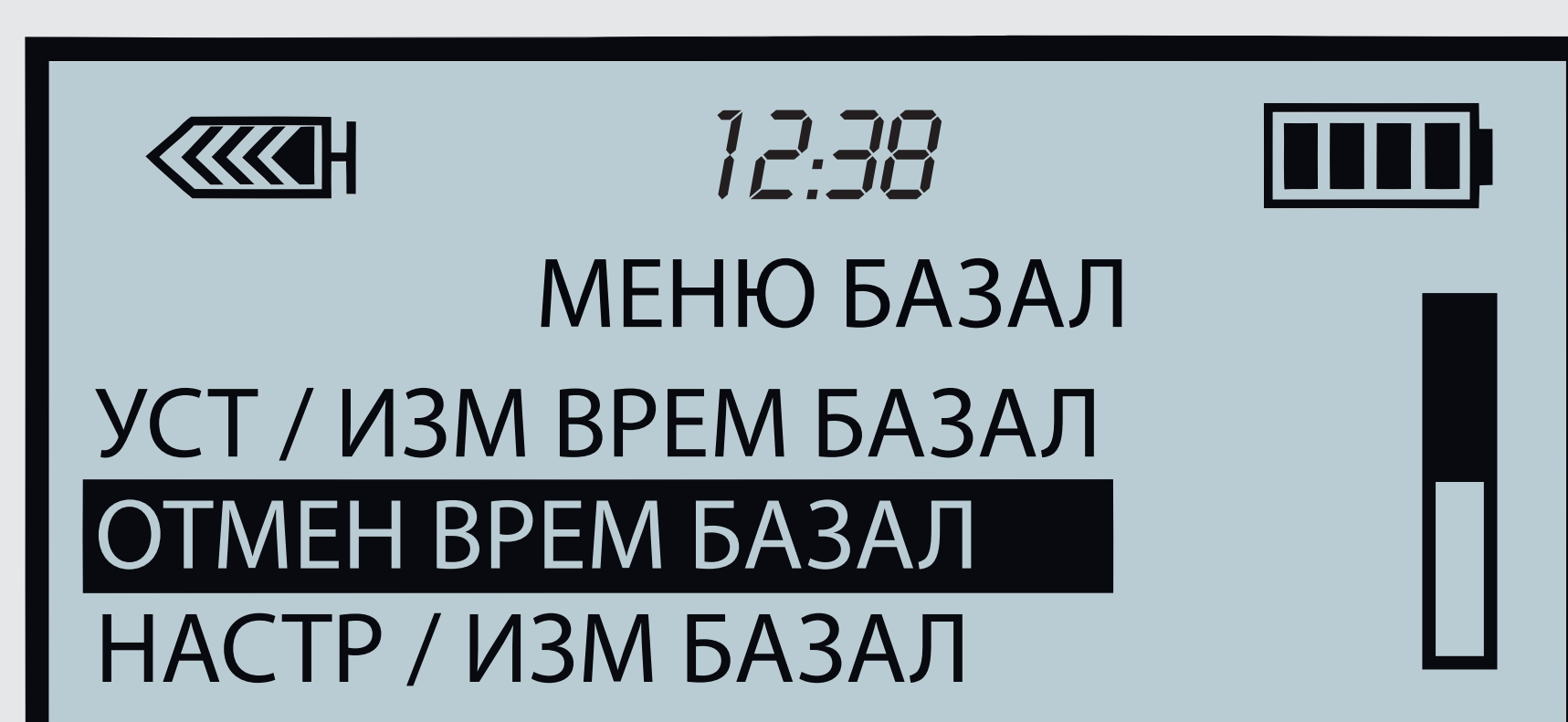

Из **ОСНОВНОГО МЕНЮ** прокрутите до строчки **БАЗАЛЬНЫЙ**. Нажмите АСТ

Выберите **ОТМЕНИТЬ ВРЕМЕННУЮ БАЗАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ**. Нажмите АСТ