




ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕНСОРА

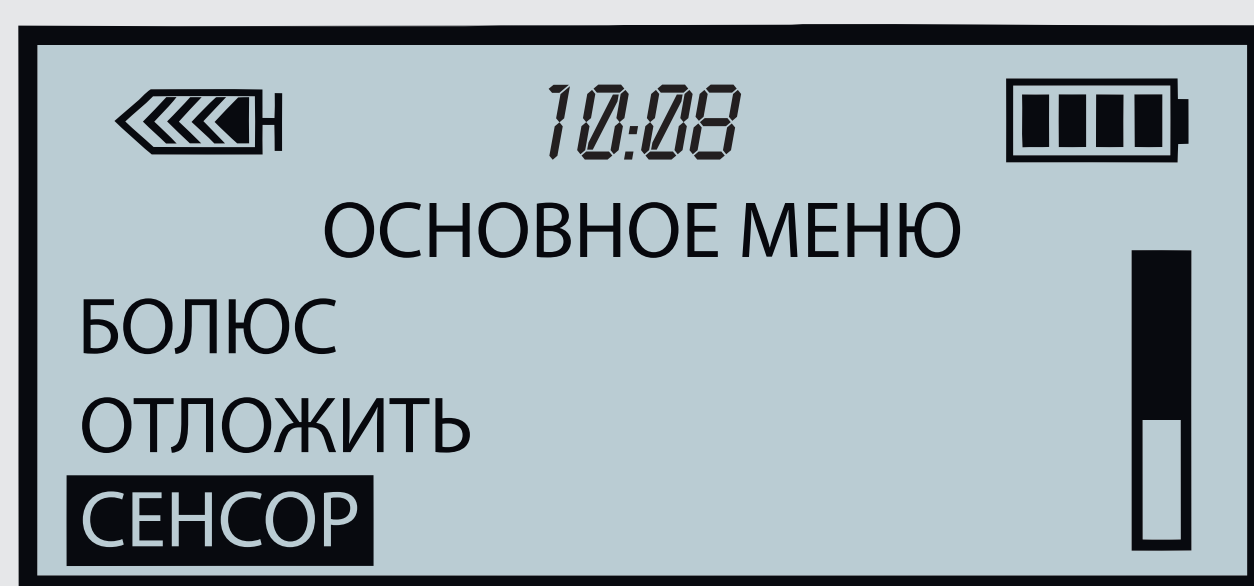


1. В ОСНОВНОМ МЕНЮ выберите СЕНСОР и нажмите АСТиз

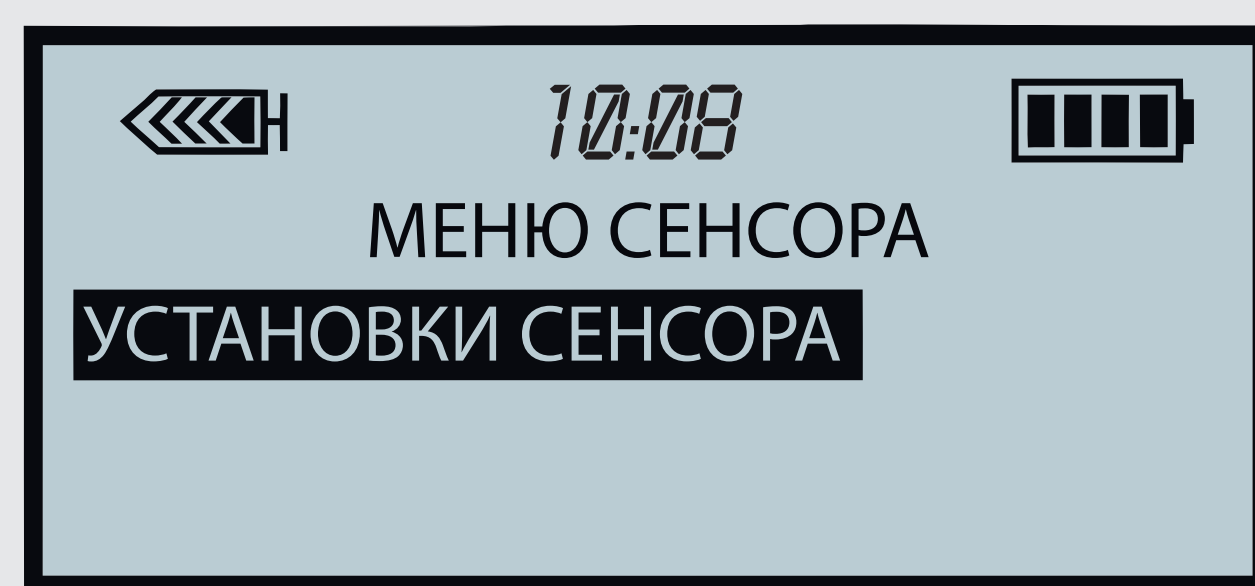


2. Выберите УСТАНОВКИ СЕНСОРА и нажмите АСТ

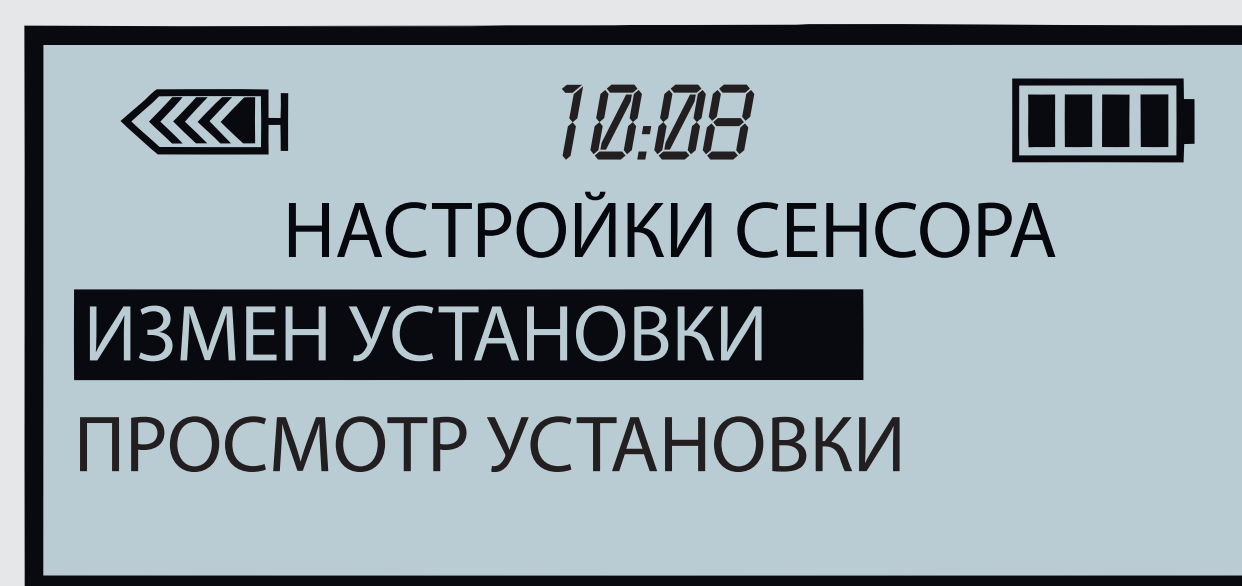


3. Выберите ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКИ и нажмите АСТ

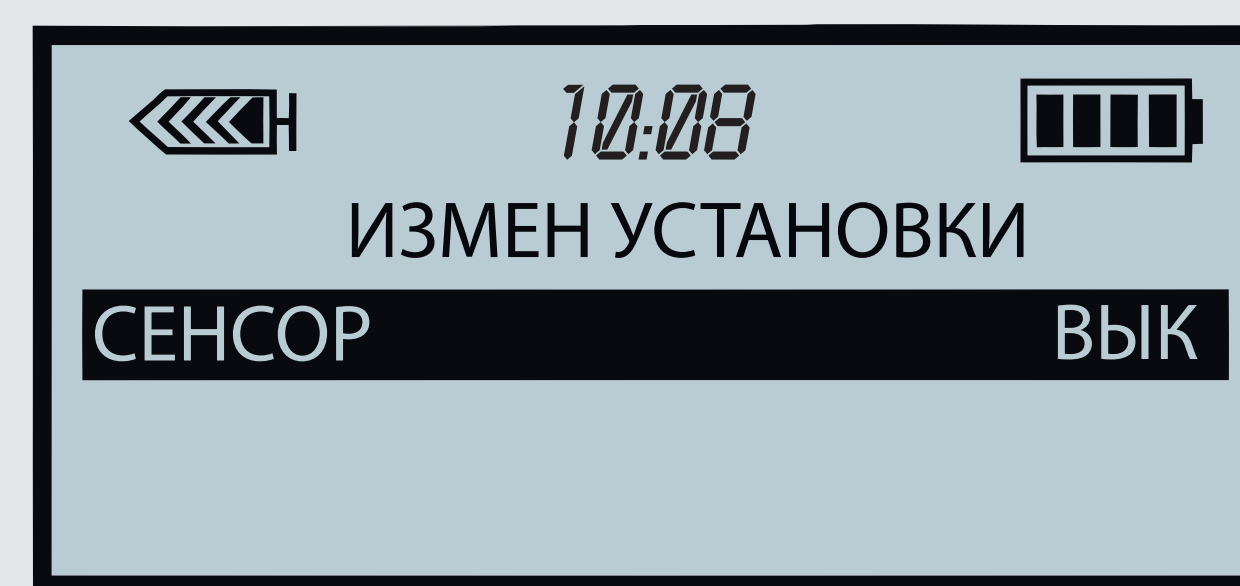


4. Выберите СЕНСОР: ВЫК и нажмите АСТ

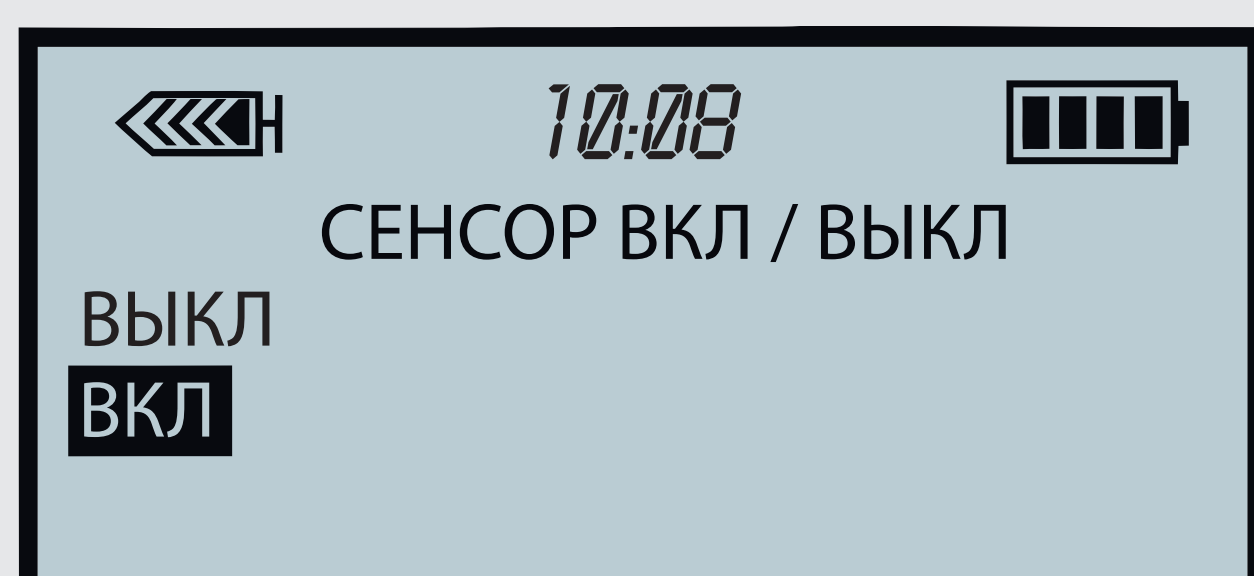


5. Включите СЕНСОР, выбрав ВКЛ и нажмите АСТ

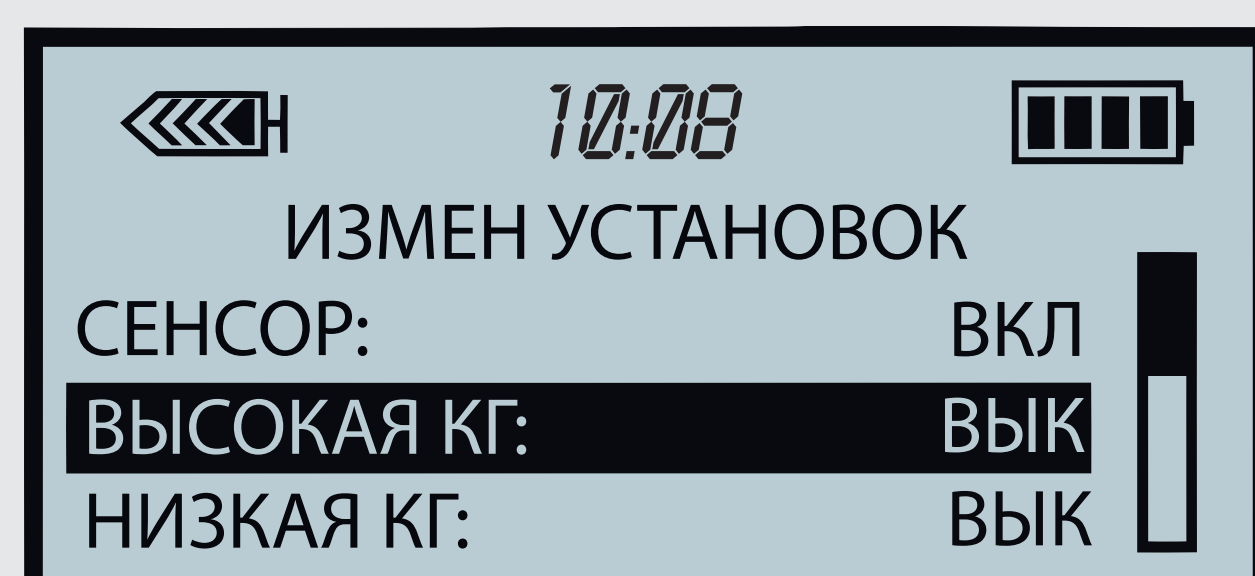




6. Включите предупреждение о высоком уровне глюкозы

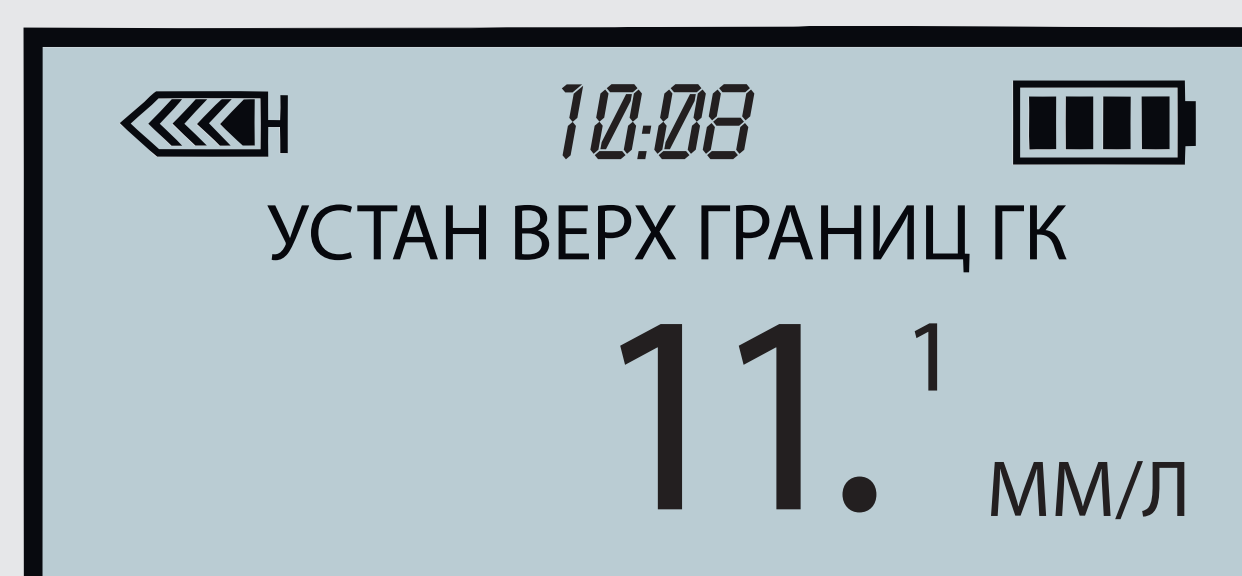


7. Установите верхнюю границу уровня глюкозы, нажмите АСТ

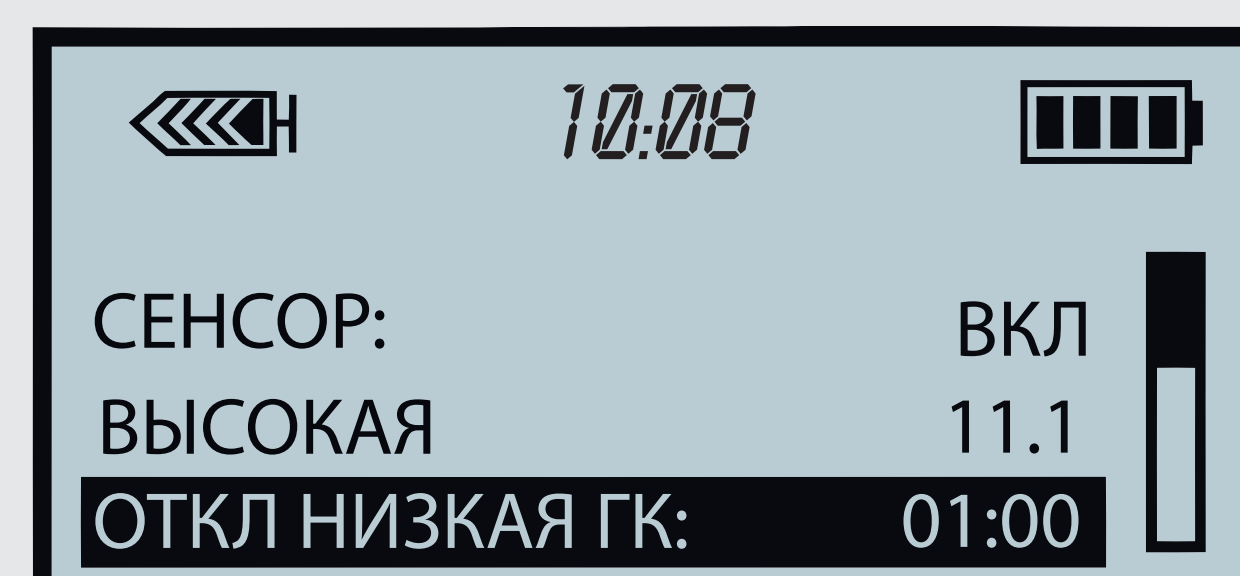



8. Установите время, через которое Вы хотите получить повторный сигнал тревоги о высоком уровне глюкозы (если уровень глюкозы выше верхней границы)

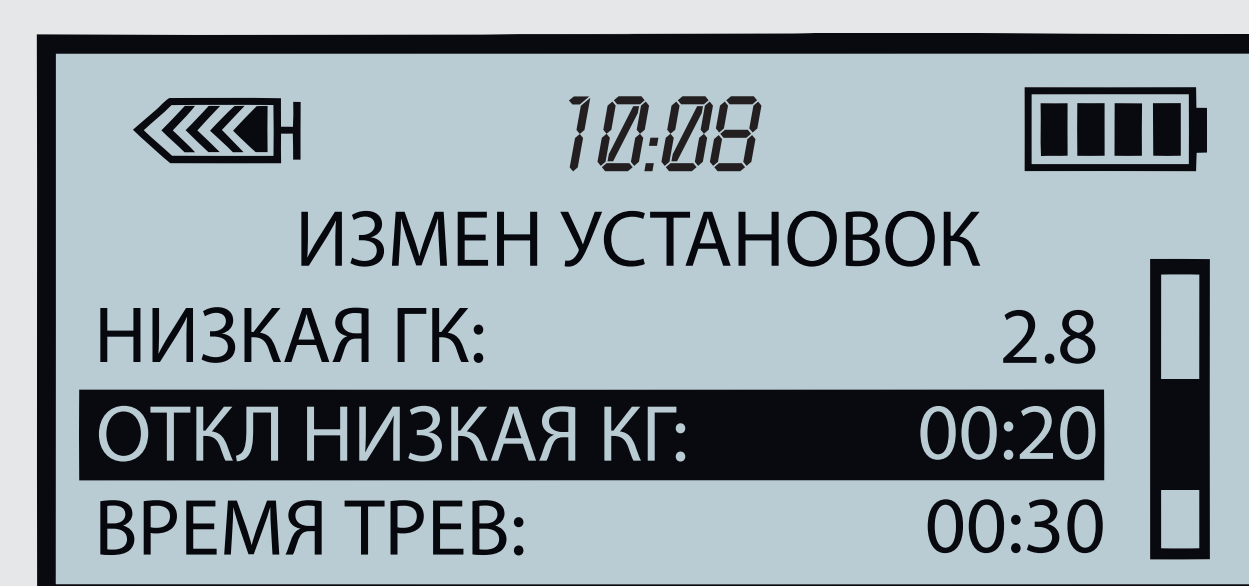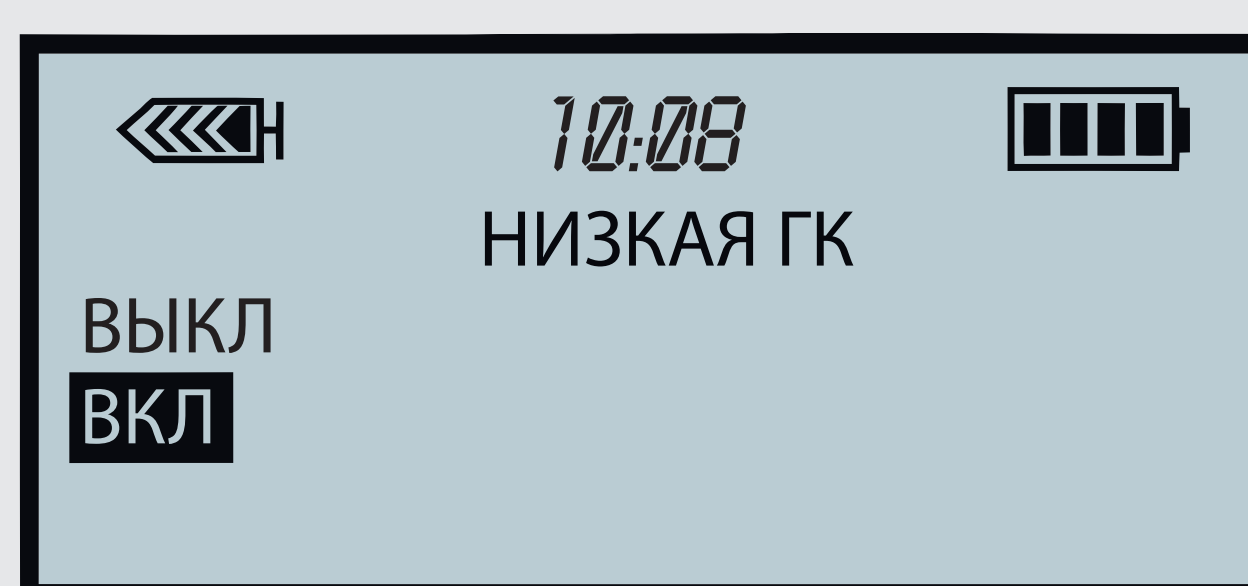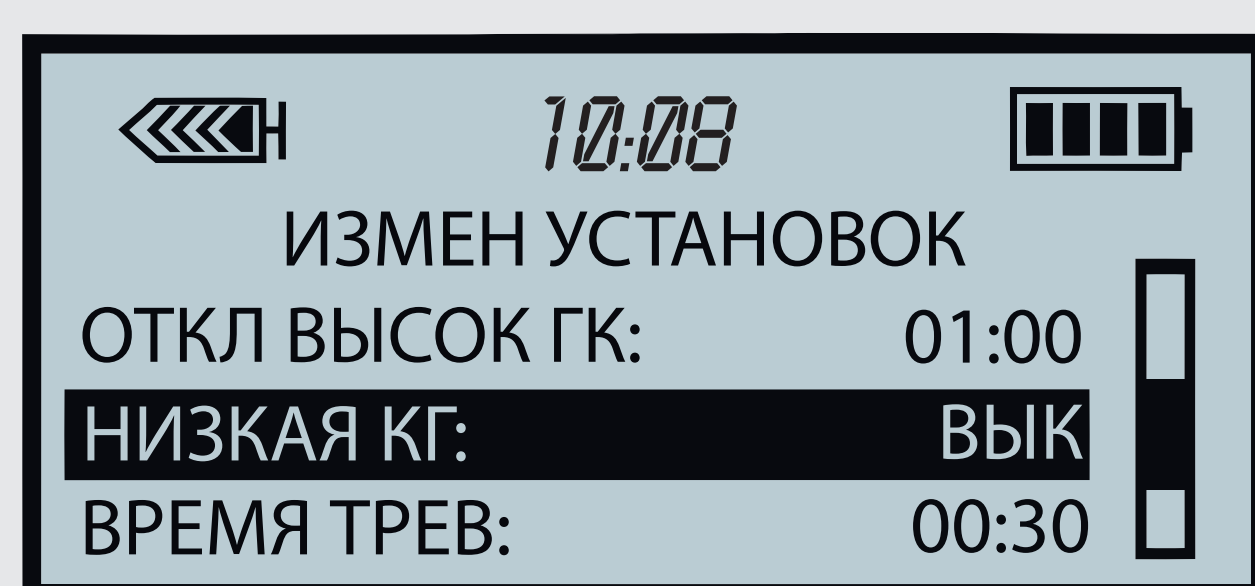



9. Аналогично установите нижнюю границу уровня ГК и время, через которое хотите получить повторный сигнал тревоги

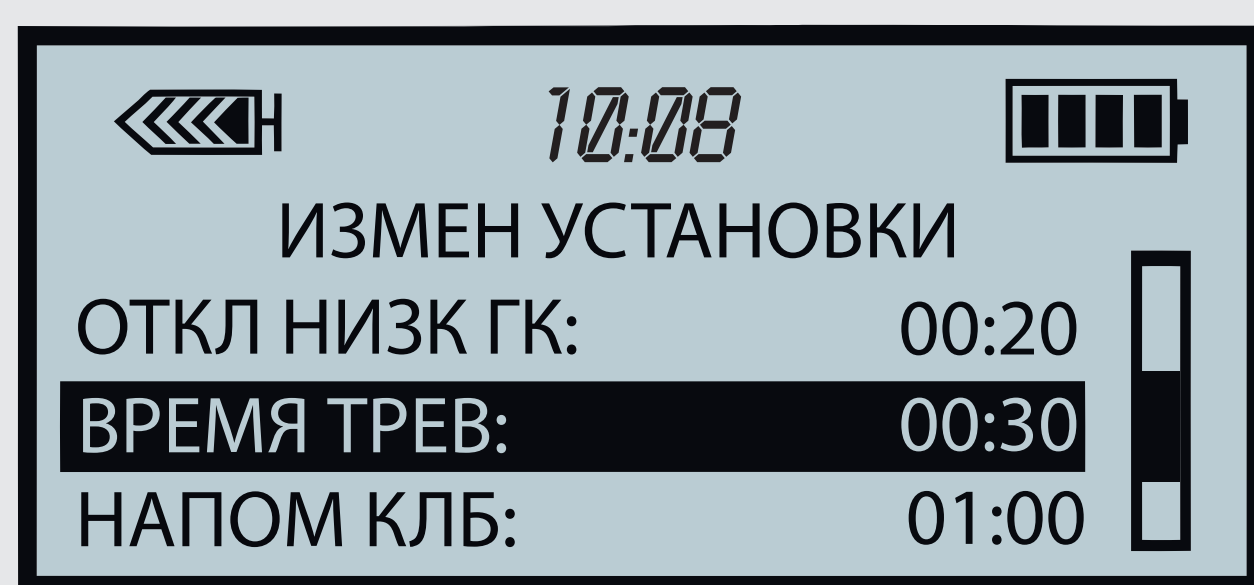


10. Установите время, через которое хотите получить повторный сигнал тревоги

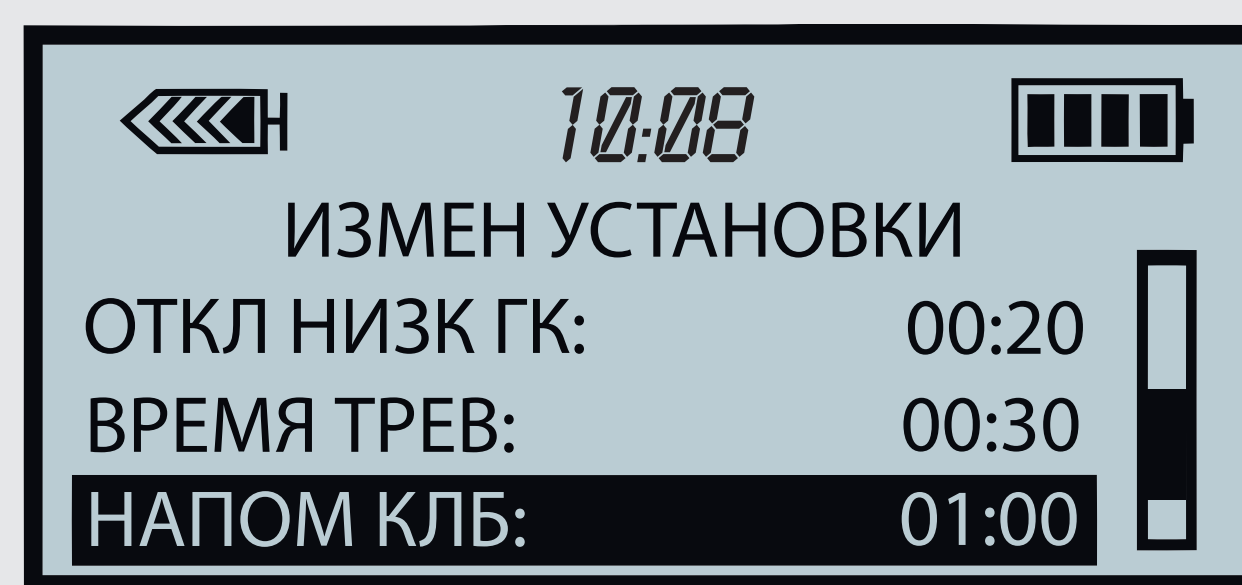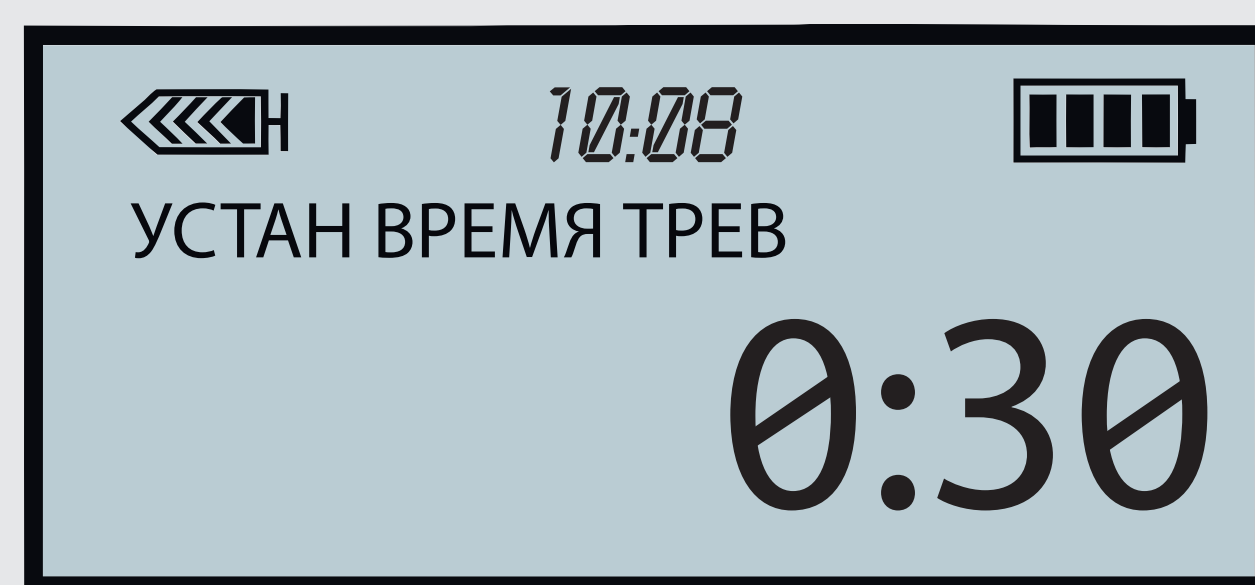

11. Установите НАПОМИНАНИЕ О КАЛИБРОВКЕ

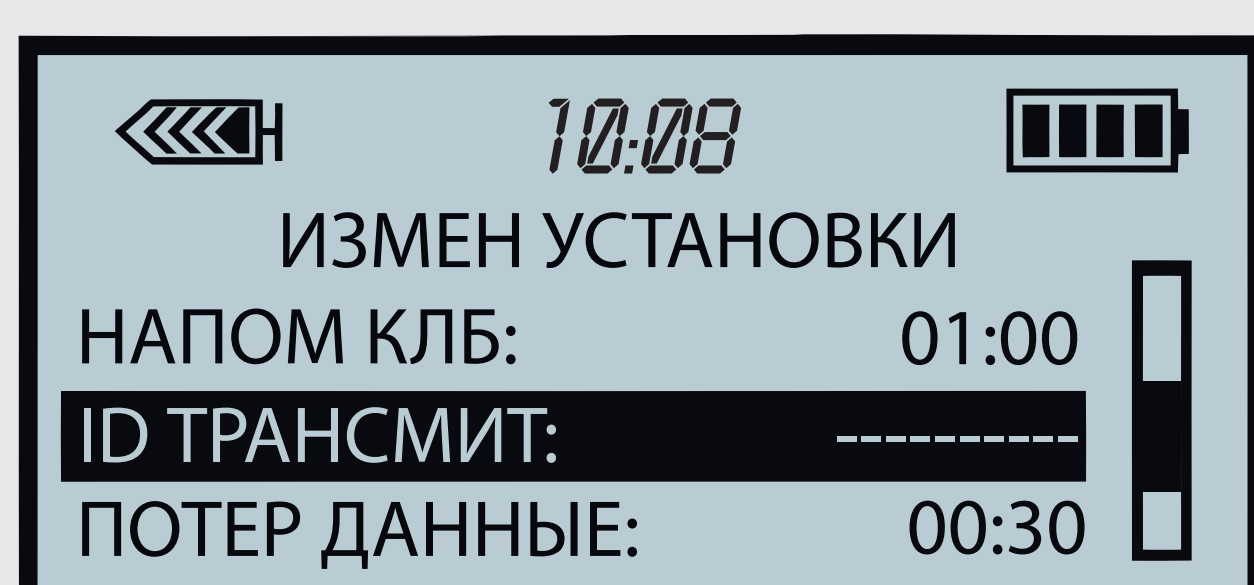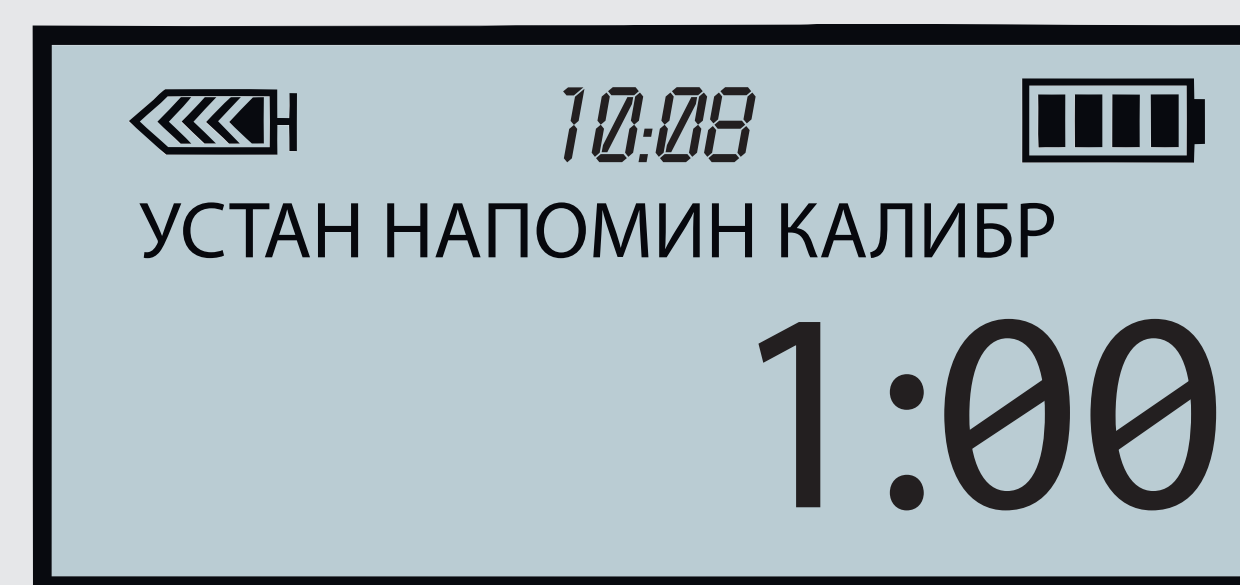

12. Введите ID трансмиттера

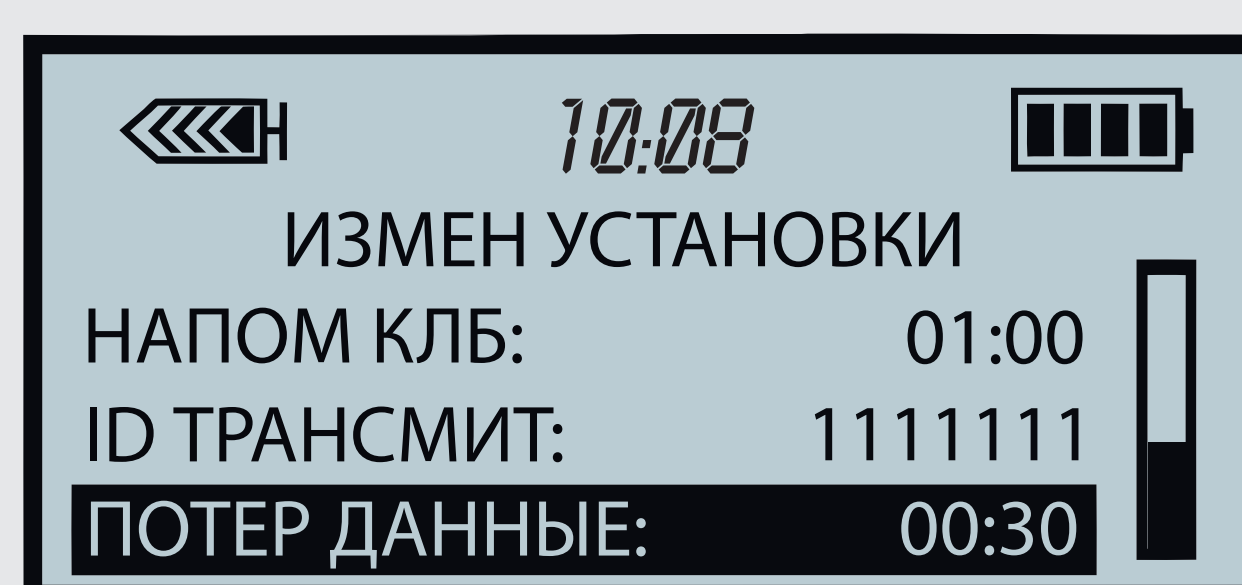

13. Установите ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ - время, через которое помпа подаст сигнал о том, что не получает сигналы с сенсора

