

# СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ПМПЫ


## НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПМПЫ



### НЕТ ИКОНКИ-КРУГА

Помпа работает и вводит инсулин в соответствии со стандартной программой.

## СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПМПЫ

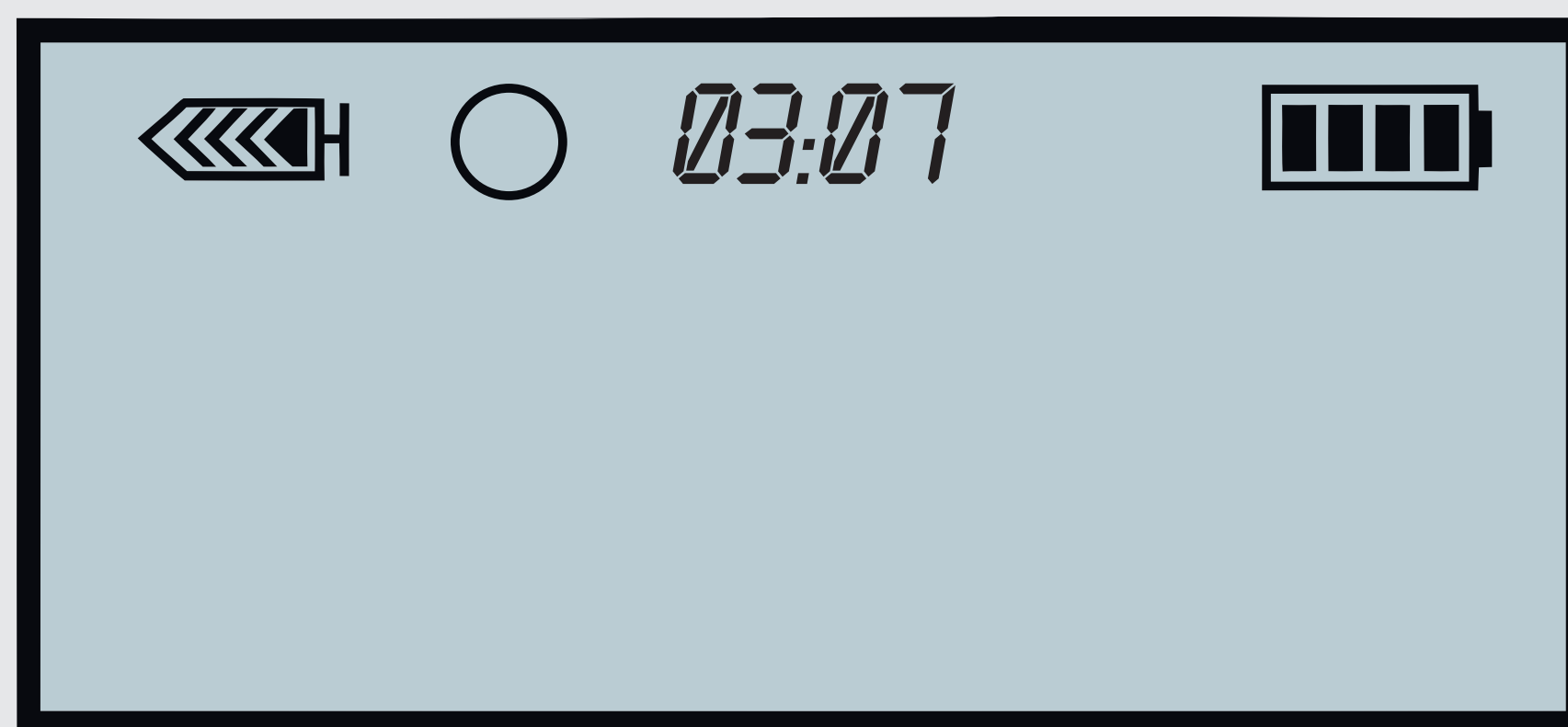

### ИКОНКА-ПУСТОЙ КРУГ


Помпа работает и вводит инсулин, но программа или ситуация необычная.

## РЕЖИМ РАБОТЫ ПМПЫ «ВНИМАНИЕ!»




### ИКОНКА-ЗАШТРИХОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ КРУГ

Помпа не вводит инсулин.

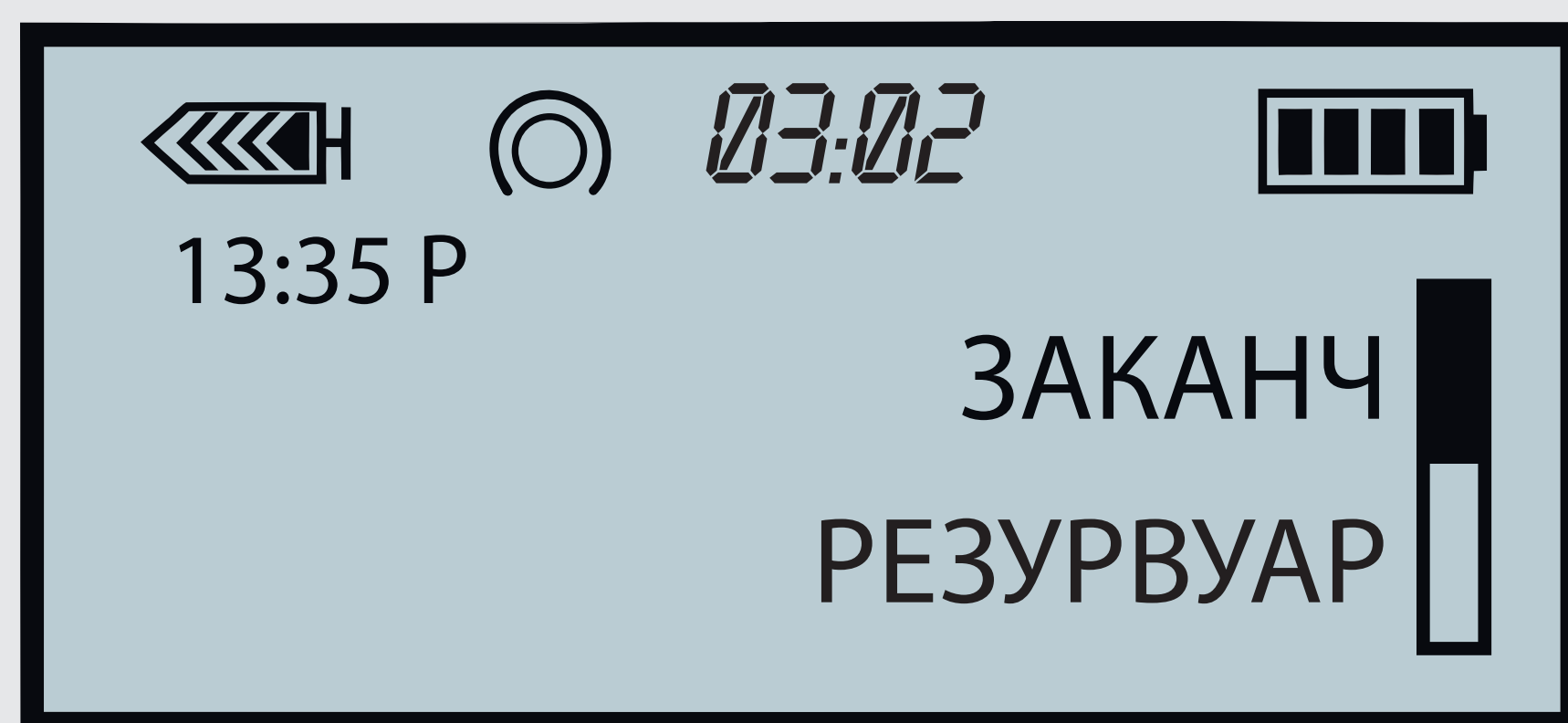


В резервуаре осталось мало инсулина. Замените резервуар как можно скорее

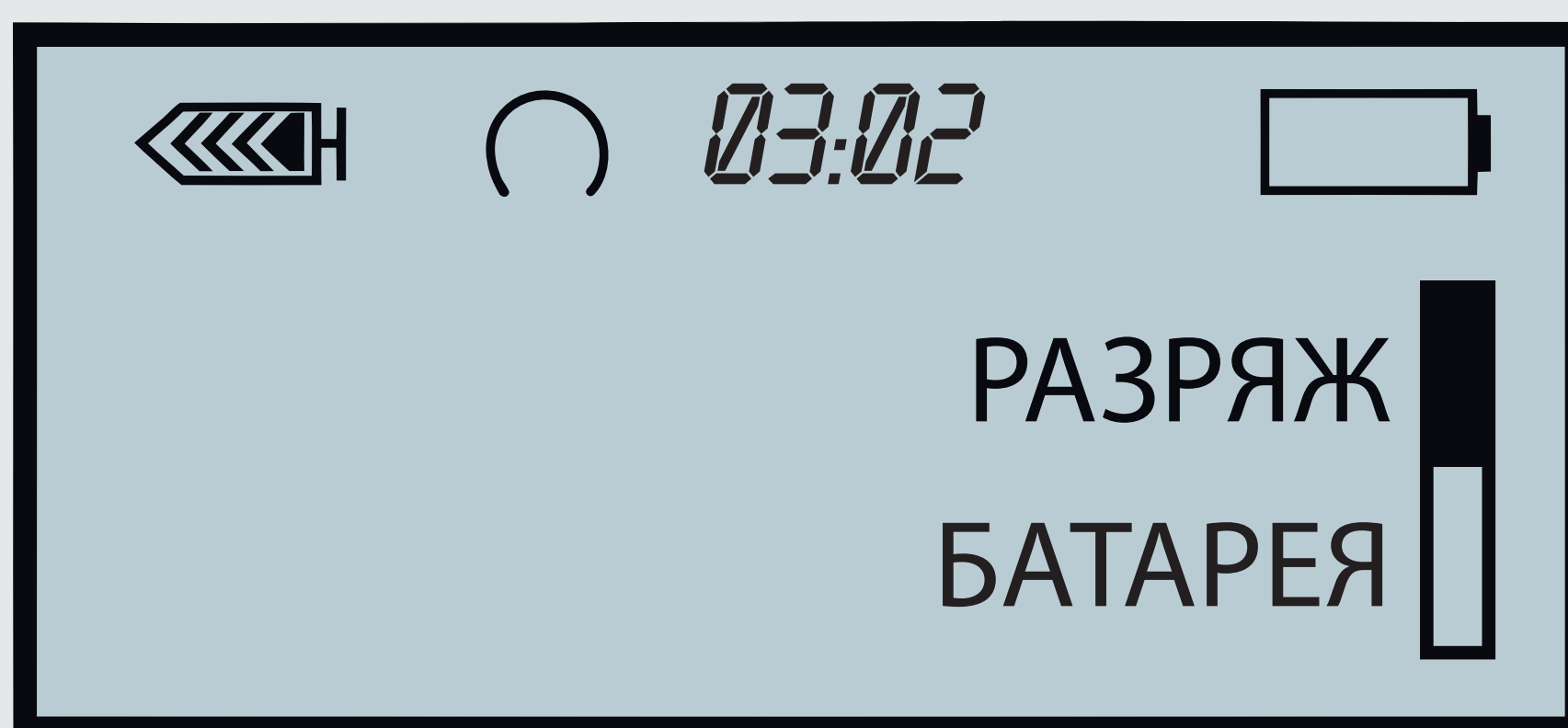


Осталось менее 10% заряда батареи. Замените батарею как можно скорее, и обязательно до того, как лечь спать.




Тест батареи не прошел. Заряд батареи недостаточен для работы помпы. Установите новую батарею.

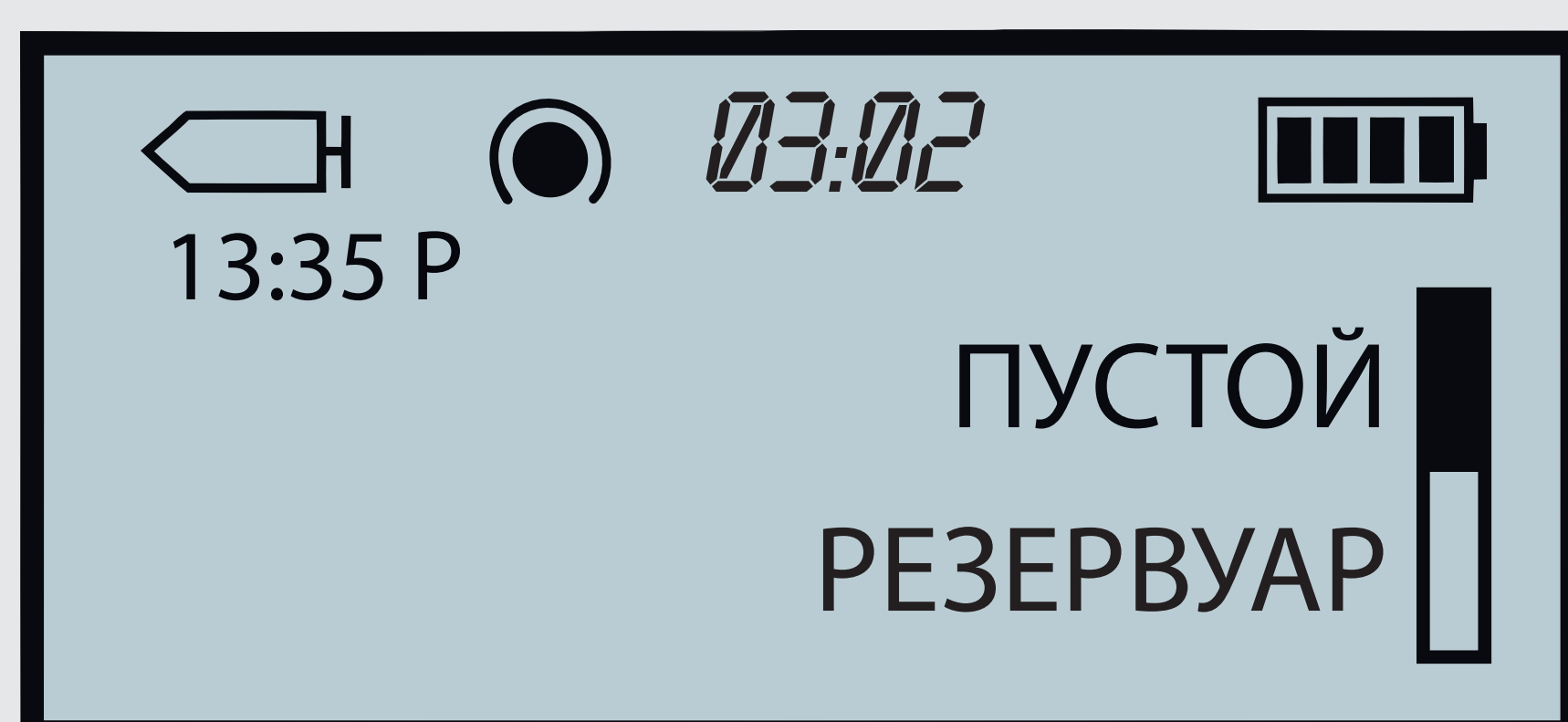

Следует немедленно заменить резервуар.

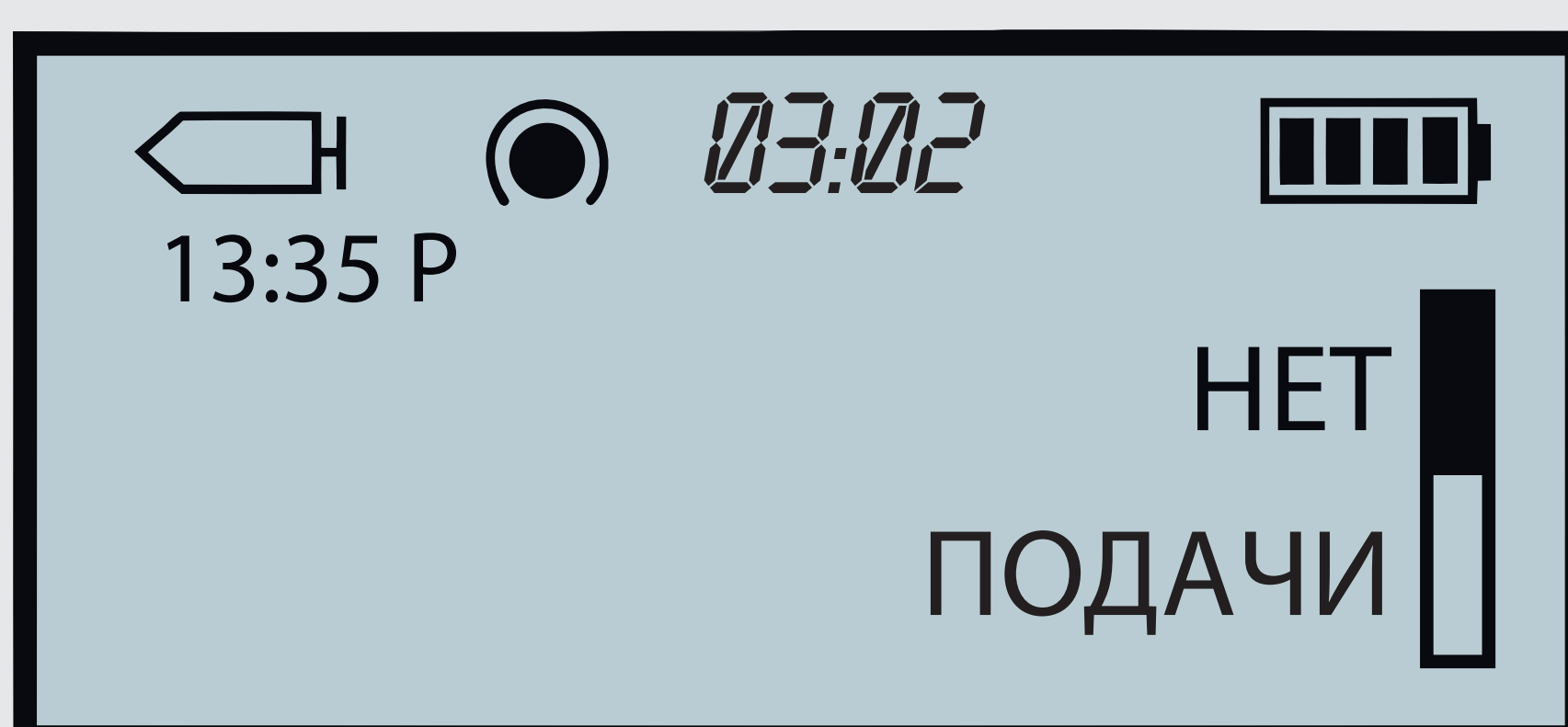

Обнаружена окклюзия: введение инсулина прекращено. Проверьте концентрацию глюкозы крови и кетонов. Замените инфузионную систему.

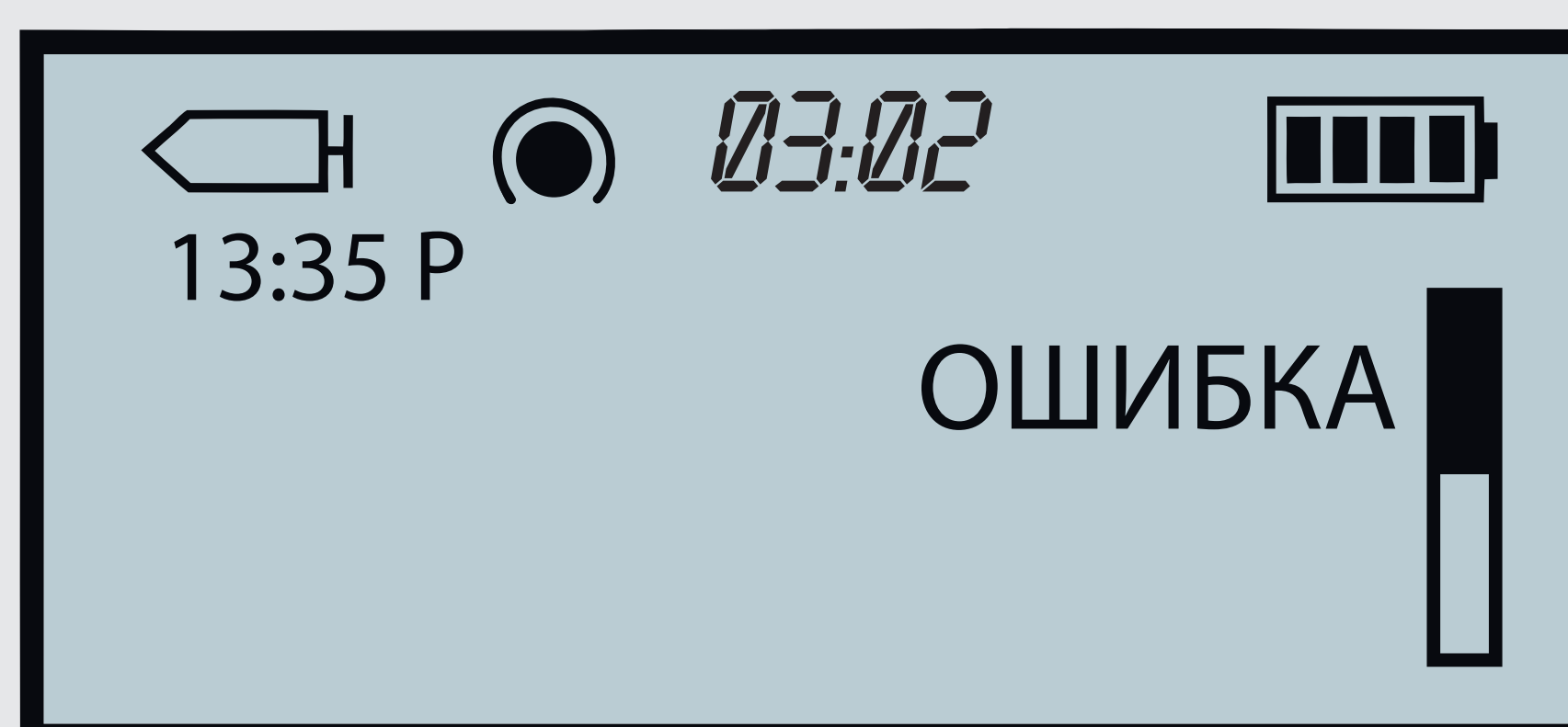

Может появиться, если какая-либо из кнопок нажата более 3 минут.



Следует проверить, правильно ли вставлена батарея (отрицательный полюс должен быть направлен вниз)

**При появлении ошибок необходимо обратиться к специалисту линии поддержки по телефону 8 8 00 200 76 36 (24/7)**

*\*здесь изображены наиболее частые ошибки. При возникновении ошибок следует обращаться на линию поддержки.*